


# Mode d'emploi

## KaVo multiCAD module Bibliothèque de dents



En toute sécurité.

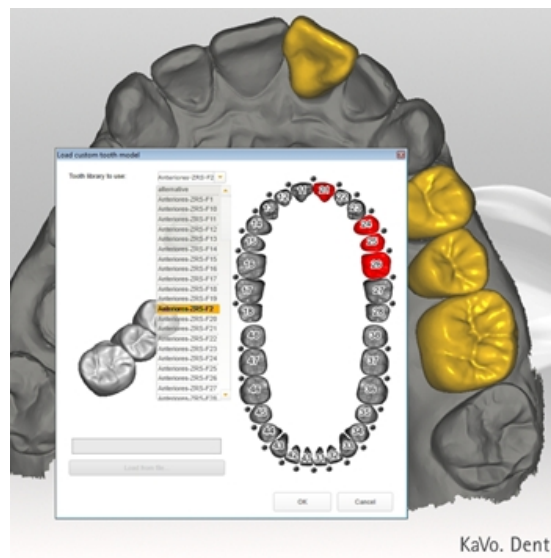

KaVo. Dental Excellence.

**Distribution :**

KaVo Dental GmbH  
Bismarckring 39  
D-88400 Biberach  
Tél. +49 (0) 7351 56-0  
Fax +49 (0) 7351 56-1488

**Fabricant :**

Kaltenbach & Voigt GmbH  
Bismarckring 39  
D-88400 Biberach  
[www.kavo.com](http://www.kavo.com)

**Table des matières**

<b>1</b>	<b>Service.....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Utilisation conforme.....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Activation de la licence.....</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Modification de dent de la bibliothèque.....</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Définir une dent de la bibliothèque dans les réglages de base.....</b>	<b>9</b>
<b>6</b>	<b>Nouvelles dents de la bibliothèque.....</b>	<b>10</b>

## 1 Service



### **Service d'assistance :**

+49 7351 56-2100

Service.Everest@kavo.com

### **Hotline utilisateur :**

+49 7351 56-2200

awt.everest@kavo.com

Veuillez toujours indiquer les numéros de série ou de version du produit lors de vos requêtes !

Vous trouverez de plus amples informations sur [www.kavo.com](http://www.kavo.com)

Seuls les techniciens formés par KaVo ou commandités par KaVo sont autorisés à effectuer les travaux de maintenance et d'entretien !

## 2 Utilisation conforme




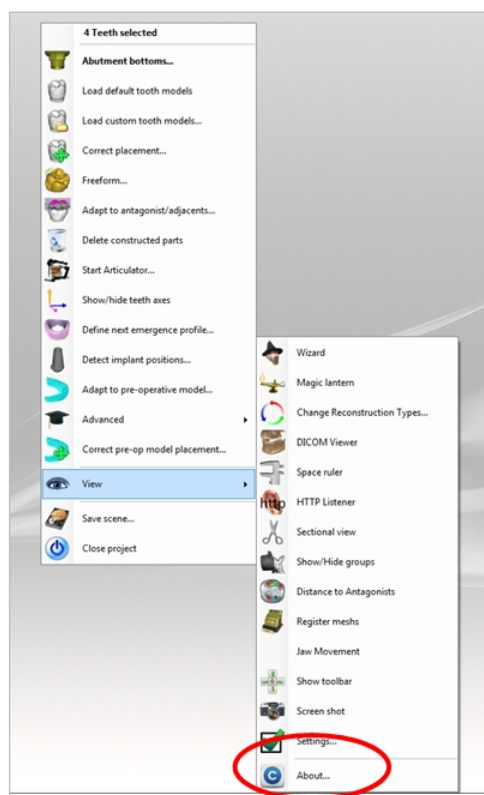
### Indication

Le module Gouttière occlusale est un module complémentaire du logiciel KaVo multiCAD. Le mode d'emploi du module Gouttière occlusale est un complément au mode d'emploi de KaVo multiCAD (**N° réf. 1.009.0045**) et ne fait foi qu'en association avec ce dernier.


L'usage conforme du module Gouttière occlusale en complément du logiciel de base KaVo multiCAD répond à l'usage conforme du logiciel de base KaVo multiCAD, tel que décrit dans le chapitre « Usage conforme » du mode d'emploi KaVo multiCAD (**N° réf. 1.009.0045**).

### 3 Activation de la licence

- ▶ Ouvrir n'importe quelle commande en appuyant sur .
- ▶ Puis ouvrir le menu « Options » en cliquant avec le bouton droit de la souris et sélectionner « À propos de ».



La fenêtre s'ouvre.

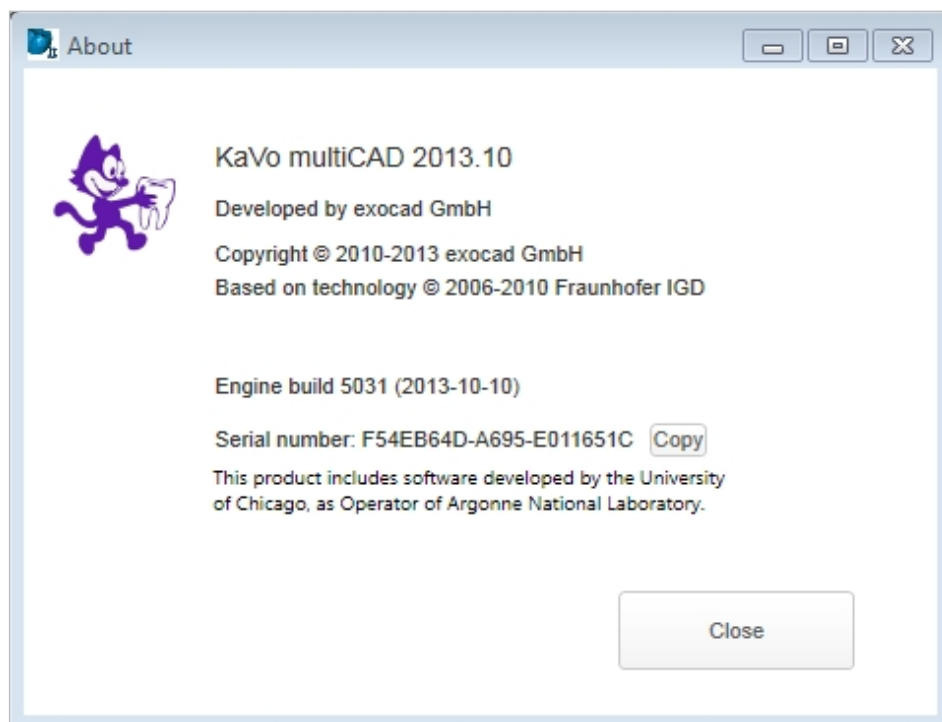


Glisser-déplacer la licence et le numéro de série dans le champ.

Le curseur de la souris change de forme lorsqu'il passe au-dessus du champ du numéro de série :



Le message suivant apparaît après la mise à jour de la licence :

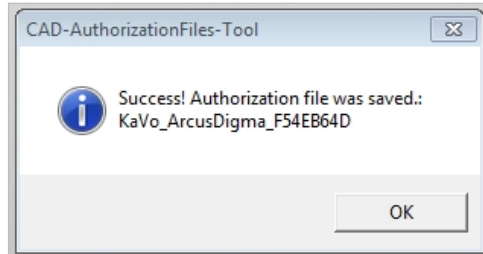


Le processus décrit peut être utilisé pour toutes les mises à jour de licence.

La licence est enregistrée localement sur le PC correspondant, en d'autres termes si le dongle doit être utilisé avec plusieurs PC, l'opération décrite pour ce PC doit être répétée.

## 4 Modification de dent de la bibliothèque

Possibilité 1 : cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'arrière-plan pour modifier toutes les dents de la bibliothèque à la fois.

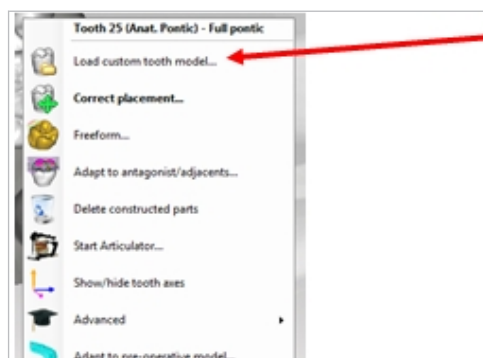


Possibilité 2 : cliquer avec le bouton droit de la souris sur une dent de la bibliothèque en particulier pour ne modifier que celle-ci.

Possibilité 3 : fermer l'assistant. Puis sélectionner les dents de bibliothèque de votre choix en appuyant sur « Ctrl » et sur le bouton gauche de la souris. Sélectionner ensuite « Ouvrir la fonction » en cliquant sur le bouton droit de la souris.

La fenêtre suivante s'ouvre :


Appuyer sur  pour afficher toutes les autres dents disponibles dans la bibliothèque et les sélectionner.

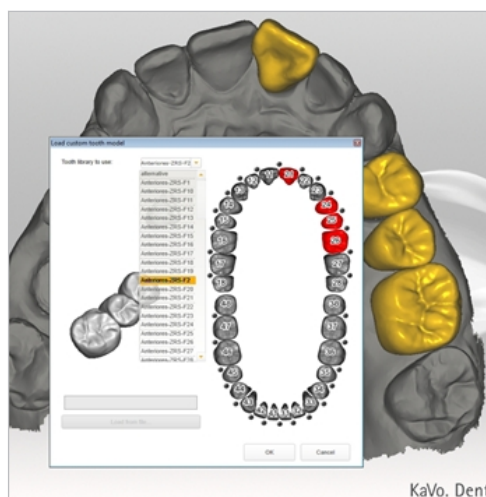


L'utilisation des bibliothèques ZRS est soumise à licence.




## 5 Définir une dent de la bibliothèque dans les réglages de base

Cliquer avec le bouton droit de la souris dans un champ libre et sélectionner « Vue , Réglages » pour ouvrir le menu suivant :

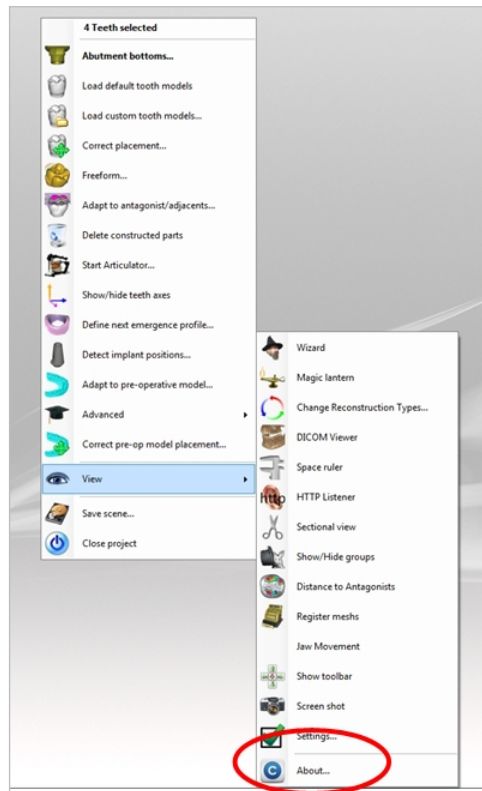


La bibliothèque dentaire de base de votre choix peut être définie dans le champ marqué.

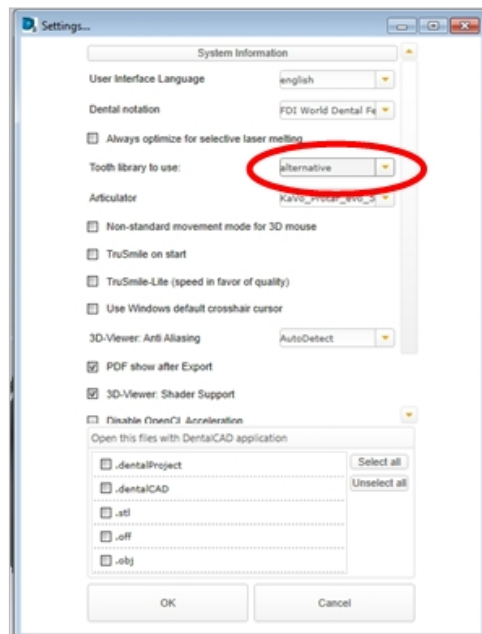

## 6 Nouvelles dents de la bibliothèque

### a.) Nouvelles bibliothèques standard :

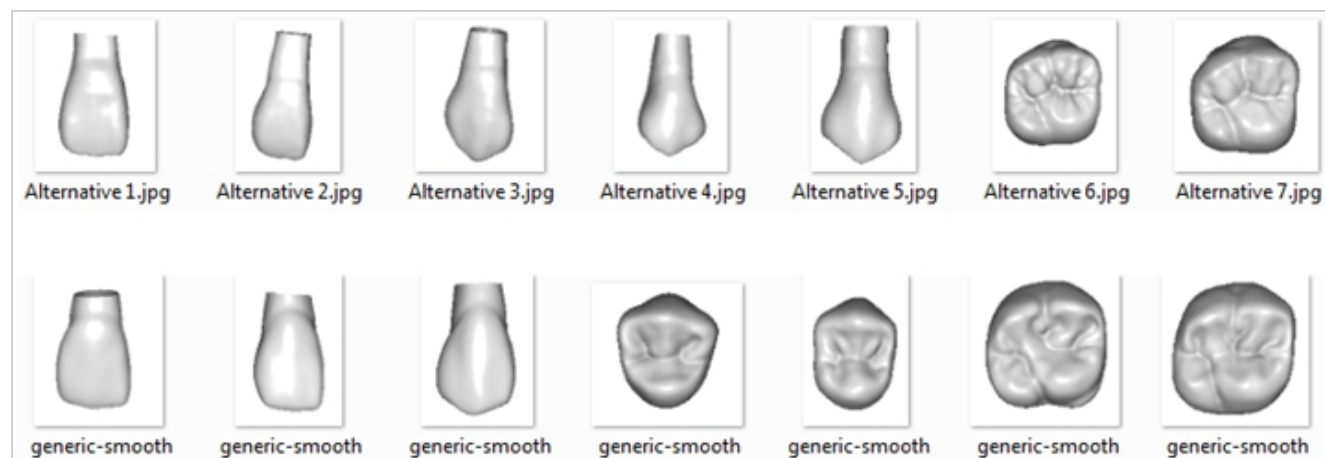

### b.) Nouvelle extension payante aux bibliothèques ZRS

